

Fragen Sie nach Ihrer  
kostenlosen Mammotome®  
Probestellung


# Strong Past. Promising Future.

## MammoMARK™ & CorMARK™

Leicht zu sehen, leicht zu platzieren!


### Die Markierungstechnologie von heute!

- Die **MammoMARK™** und **CorMARK™** Clips zur Markierung von Probenentnahmestellen nach einer Mammotome®-Vakuumbiopsie sind mit den gängigen Vakuumbiopsie-Systemen kompatibel.\*
- Höchst innovative Markierungstechnologie: Kollagen dehnt sich schnell um bis zu 300 % der komprimierten Größe aus, um die Biopsiehöhle ganz oder partiell zu füllen und dient somit als Markierung der ganzen Biopsiestelle – für mehr Genauigkeit. Nach Resorbierung des Kollagens verbleibt der eingebettete Titanclip weiterhin zentral in der Biopsiestelle für Langzeit-Nachuntersuchungen.
- Unterschiedliche Clipformen erlauben dem Anwender verschiedene Entnahmestellen in der gleichen Brust zu unterscheiden.

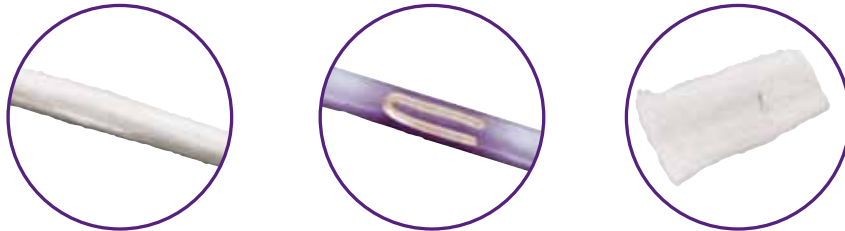

### 14-Gauge CorMARK™ Markierungsclip

- Der **CorMARK™** Clip wurde für die akkurate Markierung nach einer 14-Gauge Stanzbiopsie oder die Applikation mit einem 13-Gauge Koaxialsystem direkt in die Brust entwickelt.
- Auch verwendbar im Rahmen der neoadjuvanten Chemotherapie zur verlässlichen Befundmarkierung.

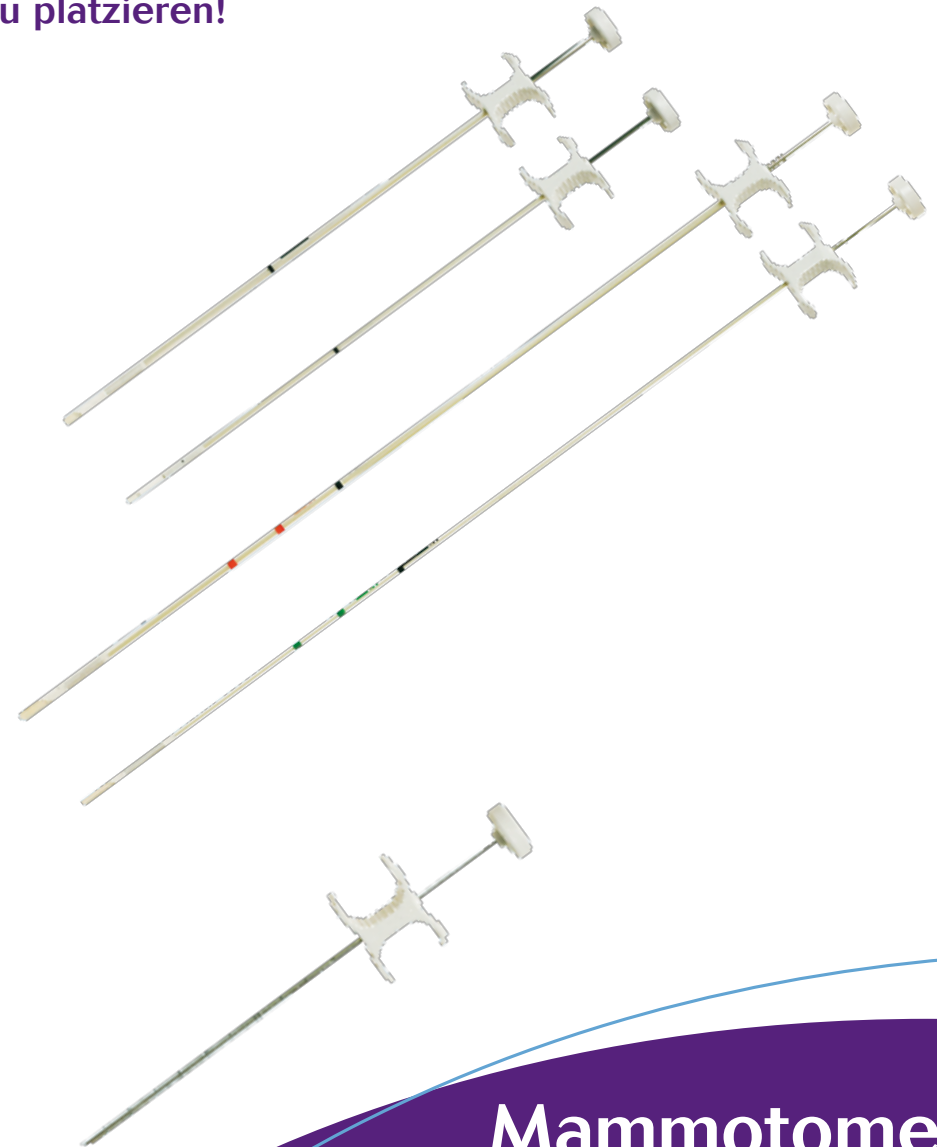






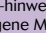
**Mammotome®**  
[www.mammotome.com](http://www.mammotome.com)

# Strong Past. Promising Future.

## MammoMARK™ Kompatibilität ist der Punkt

\* Kompatibel mit folgenden Biopsiegeräten#

Biopsiesysteme	MAM3001	MAM3002	MRM4002	MRM4008
ATEC 0909-20, 9-Gauge Standard	✓	✓	✓	
ATEC 0909-12, 9-Gauge Petite	✓	✓		
ATEC 0912-20, 9-Gauge Long	✓	✓	✓	
ATEC 0912-12, 9-Gauge Long Petite	✓	✓		
ILS 0914-20, 9-Gauge Introducer Localization Set			✓	
ILS 0914-12, 9-Gauge Introducer Localization Set			✓	
EnCor® 7-Gauge CP01-7G				✓
EnCor® 10-Gauge CP01-10G			✓	
EnCor® MRI Probe & Introducer Set ECPMRPAX-10-Gauge			✓	
Coaxial Cannula für 10-Gauge x 118mm (VC10118)	✓	✓		
Coaxial Cannula für 10-Gauge x 140mm (VC10140)			✓	


Bestellnummer	Beschreibung (Clip)	Verpackungseinheit	
MAM3001	MammoMARK 11-Gauge	10 pro Karton	
MAM3002	MammoMARK2 11-Gauge (mit anders geformtem Titanclip für zweite Entnahmestelle)	10 pro Karton	
MAM3008	MammoMARK 8-Gauge	10 pro Karton	
MRM4002	MammoMARK2 11-Gauge MR	10 pro Karton	
MRM4008	MammoMARK2 8-Gauge MR	10 pro Karton	
MAM3014	CorMARK 14-Gauge	10 pro Karton	

Für weitere Produkt- und Anwendungsinformationen lesen Sie bitte die gesamten Anwendungsvorschriften und -hinweise, die in der Gebrauchsanweisung angegeben sind. CORMARK and MAMMOMARK sind geschützte und eingetragene Marken der Devicor Medical Products, Inc.


#Firmendaten Devicor Medical Products, Inc.

Die Clips MRM4002 und 4008 sind kompatibel mit 11-Gauge und 8-Gauge ST, EX, HH und MR Mammotome® Nadeln. Die Clips MAM3001, 3002 und 3008 sind mit den ST, EX und HH Mammotome® Nadeln nutzbar.


Darstellbar unter allen bildgebenden Verfahren –  
Mammographie, Ultraschall und MR.

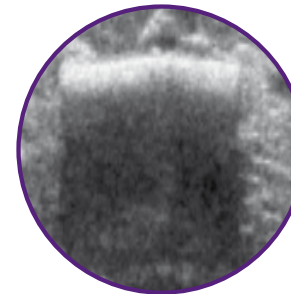

**Ultraschallbild**  
Die Verwendung nur eines einzigen Collagenstifts ermöglicht zuverlässige Sichtbarkeit.

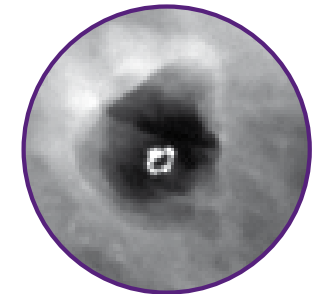

**Bild nach der Biopsie**  
des in der Biopsiehöhle zentrierten Titanclips.

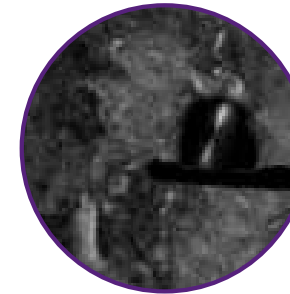

**Bild nach der MR-Biopsie**  
Der Collagenstift liegt mittig in der Biopsiehöhle.



DEVICOR MEDICAL GERMANY GMBH • Nordport Towers • Südportal 3 • D-22848 Norderstedt  
Tel.: +49 (0) 40 - 59 35 59 10 • Fax: +49 (0) 40 - 500 98 940 • info-germany@mammotome.com  
www.mammotome.com

**Mammotome®**  
www.mammotome.com